

**Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов,  
детей и лиц с ограниченными возможностями  
КГБУ СО «КЦСОН «Каратузский»**

**ПУНКТ ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

***Абсорбирующее белье. Виды. Критерии использования.***



**Составил:  
инженер по ТСР Бедарева О.Н**

**с.Каратузское  
2021 год**

**Абсорбирующее белье** — специальное белье, предназначенное для ухода за больными с недержанием мочи и кала легкой, средней и тяжелой степеней тяжести.

### **Виды:**

Согласно ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) выделяют следующие виды абсорбирующего белья:

- прокладки/вкладыши урологические;
- подгузники (традиционные, поясные);
- впитывающие трусы;
- простыни, пелёнки.

### **Показания к применению**


Показаниями к обеспечению инвалидов, включая детей-инвалидов, абсорбирующими бельем и памперсами являются имеющиеся у них ограничения способности к самообслуживанию 3 и 2 степени, передвижению 3, 2, 1 степени, возникающее при заболеваниях, врожденных пороках, последствиях травм головного, спинного мозга, мочевого пузыря, нижних мочевых путей, предстательной железы, матки, психических расстройствах (деменция, идиотия и др.), сопровождающихся недержанием мочи и кала.

## *Абсорбирующее белье.*

Критерии использования

				Мобильность больного
	Урологическая прокладка	Впитывающие трусы	Поясной подгузник	Сохранена
	Урологическая прокладка	Впитывающие трусы	Поясной Подгузник или Обычный подгузник	Сохранена частично
	Урологическая прокладка или Впитывающая простынь	Обычный Подгузник и\или Впитывающая простынь	Обычный Подгузник и\или Впитывающая простынь	Прикован к постели
Степень Недержания	→ Легкая	Средняя	Тяжелая	→

## **Прокладка впитывающая**

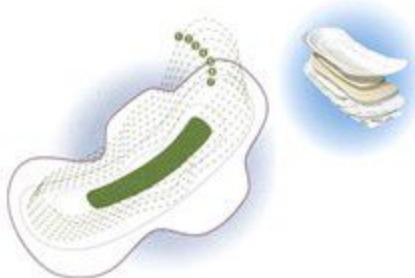

Специальное изделие, предназначенное для больных с недержанием мочи. Имеет анатомическую форму, впитывающий слой с суперабсорбентом и верхним поглощающим покрытием. Для крепления используется широкая kleящаяся полоска или фиксирующие трусы.

**Урологическая прокладка** незаметна и комфортна в носке. Эластичные резиночки и нежные оборочки препятствуют вытеканию. Прокладка может иметь индикатор влагонасыщения. Используя фиксацию прокладки, можно вести активный образ жизни.



## **Пеленка (простынь) абсорбирующая**



Специальное белье, обеспечивающее уход за больными с легкими, средними и тяжелыми формами недержания мочи и кала. Предназначено для дополнительной защиты постельного белья и обеспечения санитарно-гигиенических условий для больных с нарушением мочеиспускания, находящихся на постельном режиме.

### **Пеленка (простынь)**

абсорбирующая представляет собой многослойное изделие, впитывающим слоем которого является многослойная (6 слоев и 12 слоев) прессованная целлюлоза; нижним слоем является не пропускающая влагу нескользящая пеленка; верхним слоем служит мягкий нетканый материал.





## **Простынь (пелёнка) абсорбирующая может иметь различные технические характеристики:**

- размеры простыни могут быть разными: 40 x 60 (см); 60 x 60 (см); 60 x 90 (см);
- в зависимости от размеров изделия и плотности материалов меняется впитывающая способность простыни (пелёнки).

## **У различных фирм-производителей существует несколько видов изделий:**

при размере 40 x 60 (см) впитывающая способность от 400 до 500 мл ;

при размере 60 x 60 (см) впитывающая способность составляет от 800 до 1200 (мл);

при размере 60 x 90 (см) — от 1200 до 1900 (мл).





## Впитывающие трусы

Подгузник (памперс) является многослойным изделием. Внешний «дышащий» слой подгузника выполняется из влагонепроницательного материала — специального полиэтилена, который не дает возможности проникновения влаги наружу, но пропускает влагу внутрь. Впитывающий слой состоит из расщепленной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером — специальным веществом, повышающим впитывающую способность и превращающим влагу в гель, представленным в виде частичек округлой формы. Данный слой препятствует росту бактерий и появлению неприятного запаха.



## Подгузники поясные

для взрослых поясной является современным инновационным изделием. Такой подгузник разработан и изготовлен для улучшения эргономики ухода и для облегчения состояния пациента при нахождении в подгузнике. Специальный пояс из дышащего материала замыкается на пояске в виде кольца с помощью системы петель и крючков. Такая система фиксации позволяет оставлять наружные поверхности бедер в области тазобедренных суставов максимально открытыми без потери защитных свойств подгузника. При надёжной защите пациент чувствует себя более комфортно и свободно.

## **ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННЫМ ПОДГУЗНИКАМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:**

Не допускаются к реализации подгузники, не прошедшие клинических испытаний.

Все подгузники дышащие, выпускаются из натуральных материалов, позволяющих коже дышать.

### **Должны:**

- Обеспечивать быстрое впитывание;
- Защищать от протекания;
- Сохранять сухую поверхность;
- Предотвращать появление нежелательного запаха.

Упаковка должна быть герметично упакована, так как подгузники очень чувствительны к перепадам влажности воздуха



**ВПИТЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ  
ПОДГУЗНИКОВ, СОГЛАСНО  
КЛАССИФИКАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ  
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ (ИЗДЕЛИЙ) В  
РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И УСЛУГ,  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ (МЛ.)**

**Подгузники для взрослых XS**

**Подгузники для взрослых M**

**Подгузники для взрослых L**

**Подгузники для взрослых XL 800 -  
1800 800 - 3600 800 - 4100 1500 -  
3300**

**Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и  
инвалидов, детей и лиц с ограниченными возможностями  
КГБУ СО «КЦСОН «Каратузский»**

## **ПУНКТ ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

**662850, ул. Колхозная, дом 95, село Каратузское,  
район Каратузский, край Красноярский  
8 (39137)22275, 8(39137)22430**

инженер по ТСР Бедарева Олеся Николаевна

